


Notice d'utilisation Récepteur sans fil portatif Amplicall 150



Contenu du paquet

La boîte de l'AC150 contient les éléments suivants:

- 1 station de base AC150 (AMPLICALLT_M150)
- 1 support de chargement
- 1 batterie de recharge (pré-installée)
- 1 adaptateur CA/CC
- 1 adaptateur de prise britannique et 1 adaptateur de prise VDE (européen)
- 1 guide d'utilisation
- 1 jeu (4 pièces) d'autocollants pour les icônes d'alarme

Description

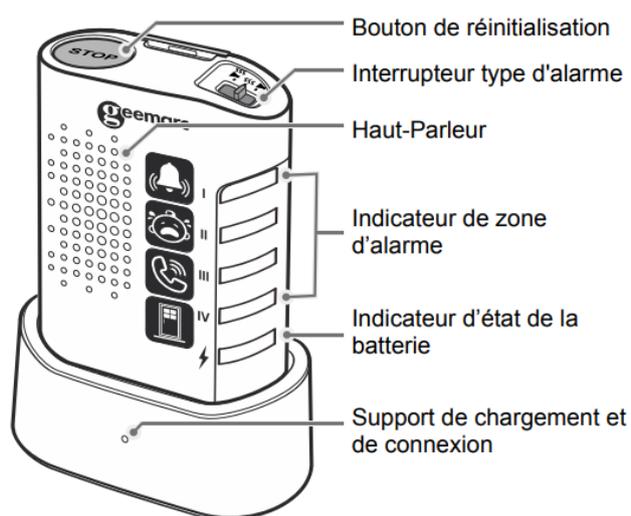


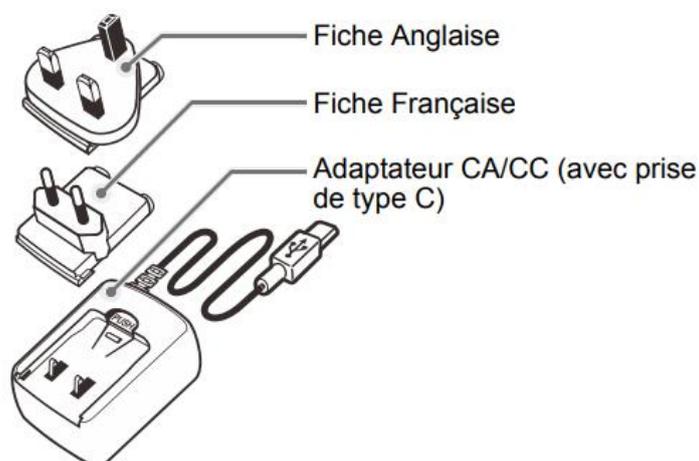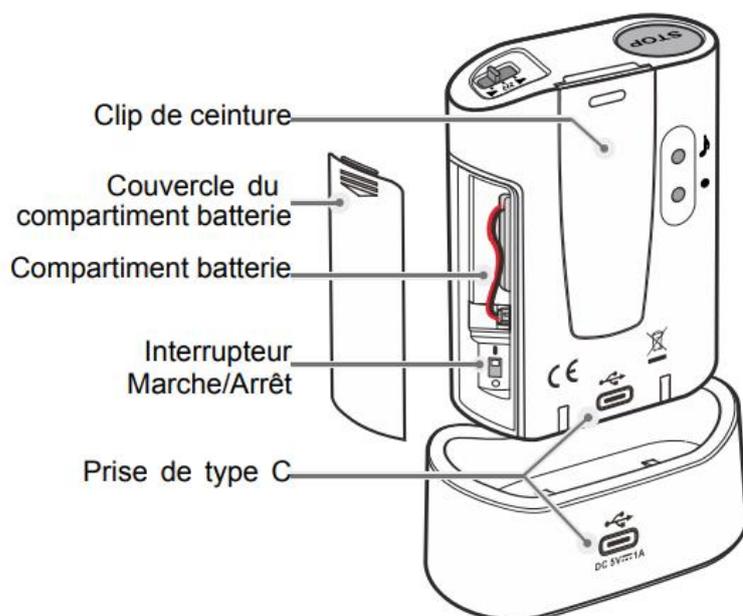

Mise en marche / arrêt

L'AC150 intègre une batterie lithium polymère. Lors de la première utilisation, vous devez mettre l'interrupteur situé à l'intérieur du compartiment batterie sur (I) **Marche**.

Il est recommandé de mettre l'interrupteur en position d'**ARRÊT** (O) lorsqu'il ne sera pas utilisé pendant une longue période.

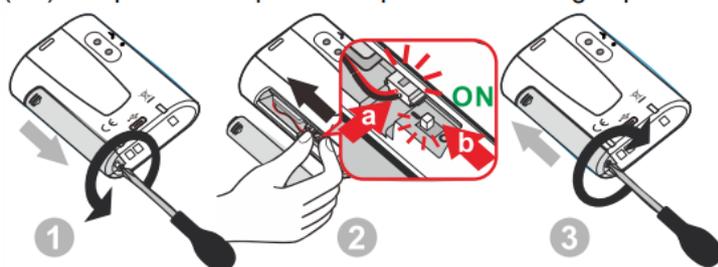


1
Desserrez la vis avec un petit tournevis phillips.

2
Connectez la batterie et mettez l'interrupteur en position **Marche**.

3
Fermez le couvercle de la batterie et serrez la vis.

Chargement de la batterie

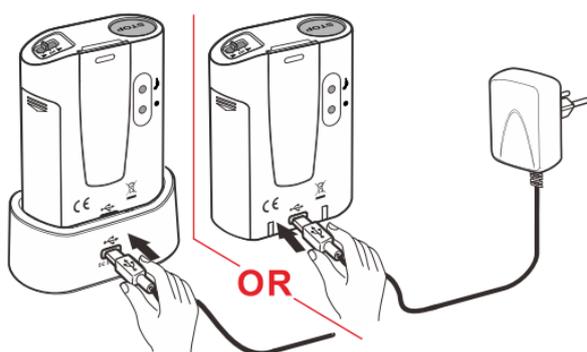

Chargement à l'aide du support de connexion – Branchez le câble d'alimentation USB de type C au support de connexion. Mettez le récepteur sur le support de connexion.

Chargement sans support de connexion – Branchez directement la fiche USB de type C à l'appareil récepteur.



Indicateur d'état de la batterie


	Mode de chargement	Mode Veille
Voyant LED	Chargement	
LED éteinte	Plein	Normal
La LED clignote toutes les 10 sec		Batterie faible

Indicateur de batterie faible – Si un voyant LED de zone clignote tous les 10 Secondes, cela indique que la batterie de cet émetteur est faible. Vous devez recharger la batterie le plus rapidement possible.

Enregistrement et mélodie d'alarme

Pour appairer un nouvel appareil, veuillez suivre les étapes décrites ci-dessous:

- Entrez en mode d'appairement pour l'AC 150.
Appuyez sur le bouton (●) et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes. La LED de l'icône de zone n°1 se met à clignoter.
- Appuyez à nouveau sur le bouton (●) pour vous déplacer vers l'icône de la zone avec laquelle vous souhaitez vous jumeler.
Appuyez sur le bouton (♪) pour faire défiler les mélodies. Dès que vous entendez une mélodie qui vous plaît, n'appuyez sur aucun bouton tant que la mélodie est en cours de diffusion.
- Une fois que l'icône de zone et la mélodie sont sélectionnées, appuyez une fois sur le bouton de l'appareil (AC101, AC110 ou AC140) pour le coupler. Si le résultat est positif, l'AMPLICALL150 produira deux courtes tonalités.
- Appuyez sur le bouton (●) pour quitter le mode enregistrement; le système est maintenant prêt à être utilisé.

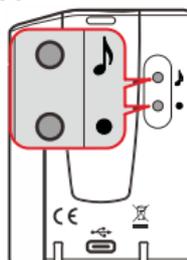

Supprimer un émetteur dans la mémoire de l'AC150

- ✧ Pour commencer, appuyez sur le bouton (●) et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes pour passer en mode enregistrement.
- ✧ Appuyez sur le bouton (●) pour vous déplacer vers la zone à supprimer.
- ✧ Appuyez sur les boutons (●) et (🎵) et maintenez-les enfoncés pendant 3 secondes.

Le récepteur génère une tonalité pour indiquer que l'émetteur de cette zone a été supprimé.

Changer la mélodie dans la zone souhaitée

- ✧ Pour commencer, appuyez sur le bouton (●) et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes pour passer en mode enregistrement.
- ✧ Appuyez sur le bouton (●) pour vous déplacer vers la zone, puis appuyez sur le bouton (🎵) pour sélectionner la mélodie souhaitée.
- ✧ Appuyez sur le bouton (●) jusqu'à ce que vous sortiez du mode enregistrement.

Utilisation

Lorsque l'AC150 reçoit un signal de déclenchement, il joue une mélodie et vibre (selon la position de réglage de l'alarme). La LED de la zone concernée s'allume pour indiquer quel capteur a été déclenché. La LED de la zone restera allumée jusqu'à ce que l'on appuie sur le bouton de réinitialisation.