

Inducto L'écouteur personnel des boucles malentendants

Descriptif du produit

Vous souhaitez bénéficier du confort d'écoute de la boucle

Vous n'avez pas de prothèse avec la fonction « T »

Vous n'avez pas de prothèse

Dotez-vous d'un inducto et bénéficiez d'un confort d'écoute absolu.

Les salles de concerts et de conférences, les églises et lieux de culte affichent maintenant très souvent le pictogramme qui indique leur équipement en boucle magnétique.

Les boucles magnétiques émettent en parallèle des haut-parleurs un son très pur, puissant et très homogène dans l'espace permettant une écoute de qualité aux malentendants équipés de prothèses « T ».



Caractéristiques techniques

L'écouteur personnel de boucle magnétique est composé :

- un boîtier récepteur de rayonnement
- un écouteur auriculaire
- un chargeur avec 2 x 2 batteries




L'écouteur auriculaire

- ultra léger, il ne pèse que 13 g
- quasi invisible, il ne dérange pas la coiffure
- relié par un fil 1,20 m au boîtier récepteur
- embouts démontables lavables à l'eau savonneuse
- fiche jack faisant marche/arrêt



Le boîtier de poche récepteur de rayonnement de boucle

- compact : L 78 x H 118 x P 24 mm
- alimentation : 2 batteries AA.LR6 de 1,5 V rechargeables
- prise jack pour le câble écouteur fait interrupteur M/A
- led rouge de signalisation de tension –
- loquet de sélection concert-conférence (aigus)
- boutons volume + / volume
- logement de 2 batteries (respecter la polarité)
- entretien au chiffon sec
- poids : 142 g avec batteries

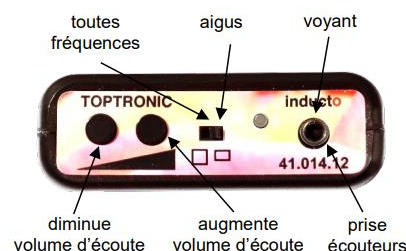

Le chargeur avec 2 jeux de 2 batteries

- secteur 110 V / 230 V
- livré avec 4 batteries AA-NI-MH 1,5 V
- permet la recharge simultanée de 4 batteries
- led témoin de charge : clignote - fixe pendant la charge
- led éteinte : batteries chargées - courant coupé
- durée de charge : 80 % en 7 heures
- durée minimum d'écoute à 100 % : 8 heures par jeu
- 2 batteries en service
- 2 batteries en réserve
- lot de 4 batteries en rechange



L'espace couvert par le rayonnement magnétique

- indiqué par un pictogramme
- couvre en général la salle concernée selon NF 60118-4
- de légères différences de volume entre les bords et le centre sont compensées par les potentiomètres d'inducto.

Mode d'emploi

- charger les batteries dans leur support AA Panasonic
- brancher 2 batteries préalablement chargées dans le boîtier inducto
- connecter l'écouteur = M/A inducto émet une tonalité, la led rouge s'allume
- vous êtes en écoute de boucle
- optimiser le volume à votre goût :
 - bouton gauche réduire .
 - bouton droit augmenter
- le loquet filtre permet de sélectionner la totalité de la bande passante ou de se concentrer sur les aigus (à droite)
- arrêt : retirer la jack de l'écouteur de l'inducto